


Inteligentní ultrazvukový domácí čistič zubů s LED lampou

Uživatelská příručka
Product introduction

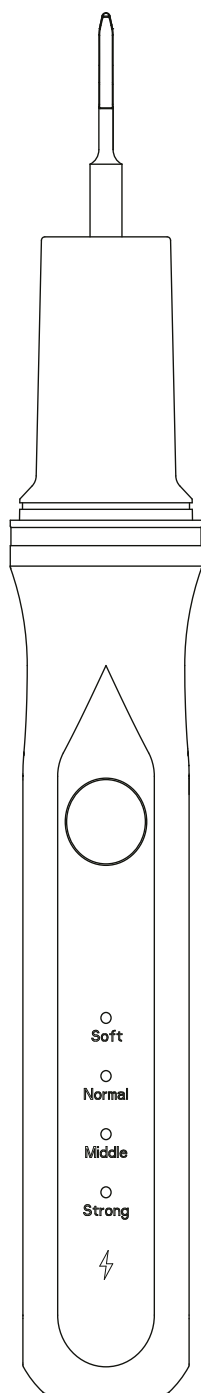

Děkujeme za výběr a důvěru

Představení produktu

Zdraví začíná u zubů. Děkujeme, že jste si vybrali náš inteligentní ultrazvukový domácí čistič zubů s LED lampou. Je speciálně navržen pro rodinné uživatele. Prostřednictvím inovativního designu se změnila komplexní struktura původního čističe zubů na inteligentní čipový integrovaný obvod s koncepcí inteligentní frekvenční stabilizace. Má stabilní výkon a silnou použitelnost s řadou funkcí. Celý proces čištění zubů je řízen mikroprocesorem, který zajišťuje stabilní výkon a dokáže účinně odstranit zubní kámen, skvrny od cigaret, kávy a čaje. Obsluha je jednoduchá, pohodlná, rychlá a efektivní.

Bezpečné používání

- Nepoužívejte přístroj jinou metodou, než je popsána v tomto návodu.
- V případě poruchy, prosím přestaňte používat.
- Tento výrobek není hračka. Nenechte ho používat své děti.
- Zakázáno pacientům s kardiostimulátorem.
- Pacienti s onemocněním srdce, těhotné ženy a děti by měli být opatrní.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, měl by být skladován v 10° až 40°C ve vnitřní prostředí.
- Výrobek sami nerozebírejte, nepřeměňujte ani neohýbejte.
- V případě problémů s kvalitou produktu kontaktujte zákaznický servis obchodu, kde jste tento produkt zakoupili.

Vlastnosti produktu

1. Jednoduchý, rychlý a efektivní rodinný produkt.
2. UHF vibrace, jemné, pohodlné, vylepšené tři nastavitelné režimy.
3. Ochrana automatického vypnutí po 10 minutách. Po vypnutí nesvítí LED světlo.
4. Integrovaný design, hlavové LED osvětlení, jasné sledování stavu úst.
5. Ultrazvukový měnič je vyroben z letecké slitiny titanu.

Princip fungování produktu

Vysokofrekvenční elektrická pulzní vlna je generována elektronickým oscilačním obvodem, zesílena na určitou intenzitu a přenášena do převodníku, který přeměňuje elektrickou energii na mechanickou a stimuluje pracovní hrot, aby produkoval vibrace stejné frekvence k dosažení rozdrčení zubního kamene, odstranění odolných zubních skvrn a uvolnění zubního kamene. Ion je produkován iontovým generátorem a držen v iontovém spojovacím kroužku. Záporné ionty jsou přenášeny na zuby a zubní skvrny jsou uvolněné a oddělené od zubů pomocí principu vyloučení negativních iontů.

Záležitosti vyžadující pozornost

1. Když se ultrazvukový pracovní hrot dotkne zubů, ozve se pípnutí, což je normální pracovní stav.
2. Pokud máte onemocnění parodontu, poraďte se před použitím se svým zubním lékařem.
3. Může dojít ke krvácení i v případě zdravé dásně.
4. Pokud krvácení z dásní přetrvává, což může být způsobeno defekty dásní, jako je periodontální onemocnění, přerušete používání a poraďte se se svým zubním lékařem.
5. V procesu čištění zubů nezůstávejte pracovním hrotem dlouho na povrchu zubů. Chcete-li ze zubů odstranit zubní kámen a skvrny, použijte 45° pracovní hrot.
6. Po spuštění přístroje není slyšet žádný zvuk hrotu. Pokud se ozývá zvuk hrotu, je to normální jev, můžete jej znovu nainstalovat nebo utáhnout.
7. Můžete pociťovat slabý proud kvůli iontům při ošetřování oblasti poblíž částí se zubním kazem, zlatou korunkou nebo stříbrnou korunkou. V tomto případě se prosím nedotýkejte iontového spojovacího kroužku, k ošetření používejte pouze ultrazvukový výstup a výstup iontů nebude přenášen na zuby.


Čištění a údržba

1. Nevkládejte ani nepouštějte výrobek do jiných kapalin ani do nich.
2. Se zařízením je třeba zacházet opatrně a skladovat jej na suchém místě.
3. Nemíchejte s toxickými, žíravými, hořlavými a výbušnými materiály.

Záležitosti vyžadující pozornost

1. Nenamáčejte do vody nebo kapaliny.
2. Před a po použití udržujte stroj čistý.
3. Pracovní hrot musí být při použití utažen.
4. Při prvním použití spusťte na 2 ~ 3 sekundy, zastavte na 1 sekundu.
Po několikátém provedení bude přístroj v nejlepším stavu.
5. Neohýbejte ani neobrušujte pracovní hrot.
6. Nekomlepejte ani neškrábejte do rukojeti.
7. Po použití stroj osušte a uchovávejte jej v suchém a chladném prostředí.
8. Během používání zařízení netahejte za napájecí kabel, aby nedošlo k oddělení rukojeti od stroje.


Popis produktu

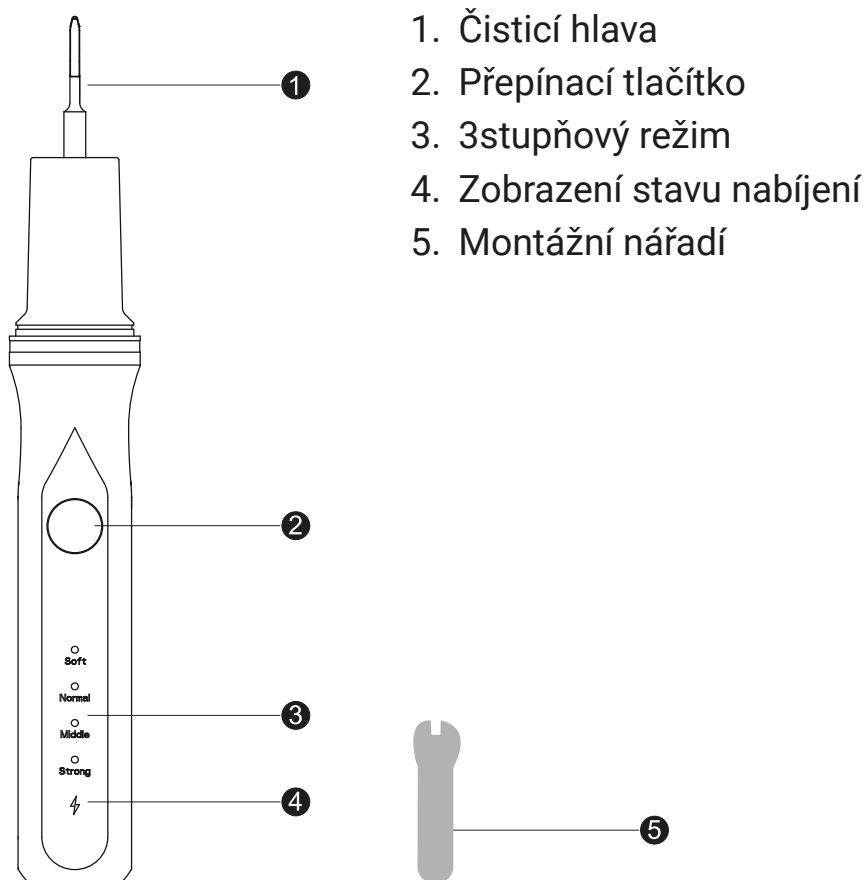


Používání

1. Před použitím se ujistěte, že je čistič plně nabitý.
2. Stiskněte tlačítko zapnutí pro spuštění přístroje, zapněte světlo a zařad'te stupeň SOFT. Současně zapněte režim iontů a ultrazvuk. Stiskněte znovu tlačítko zapnutí, iont zůstane nezměněn a ultrazvuk přejde do stupně COMFORT a poté STRONG. Doporučuje se začít z nízkého stupně a postupně zvyšovat.
 1. SOFT
 2. COMFORT
 3. STRONG
3. Vyberte vhodný hrot a nainstalujte jej ve směru hodinových ručiček na hlavní motor pomocí malého klíče. NEPOUŽÍVEJTE silné otáčení, aby nedošlo k poškození rozhraní. Nejprve otevřete příslušné ozubené kolo a rozvibrujte zubní kámen kovovou hlavou. Poté jej, při odstraňování zubního kamene, seškrábněte slabou silou a zkuste to vícekrát. Ikdyž je zubní kámen tvrdý, s trochu trpělivosti to zvládnete.
4. Stiskněte ON a OFF, rozsvítí se kontrolka režimu a kontrolka LED na předním konci rukojeti, což znamená, že přístroj běží.
5. Když přístroj pracuje normálně, frekvence vibrací je velmi vysoká. Při čištění zubů potřebuje pouze lehký kontakt a opakovaný pohyb určitou rychlostí, aby odstranil zubní kámen. Pozor: Při čištění zubů nevyvíjejte částečnou sílu na jednom místě!
6. Po zhasnutí kontrolky LED stiskněte tlačítko zapnutí a odpojte napájecí kabel.
7. Přístroj je náchylný na poškození vnitřních a vnějších součástí způsobených házením, dotykem a pádem.
8. Hlava kartáčku slouží k čištění zubů po čištění zubního kamene, nelze ji použít jako elektrický zubní kartáček.
9. Detekce nízkého napětí. Alarm bliká když je napětí baterie nižší než 3V.
10. Po použití dlouze stiskněte tlačítko pro otevření a vypněte napájení. Zařízení má přednastavenou funkci automatického vypnutí po 10 minutách, aby se zabránilo ochraně proti přehřátí.

Hroty

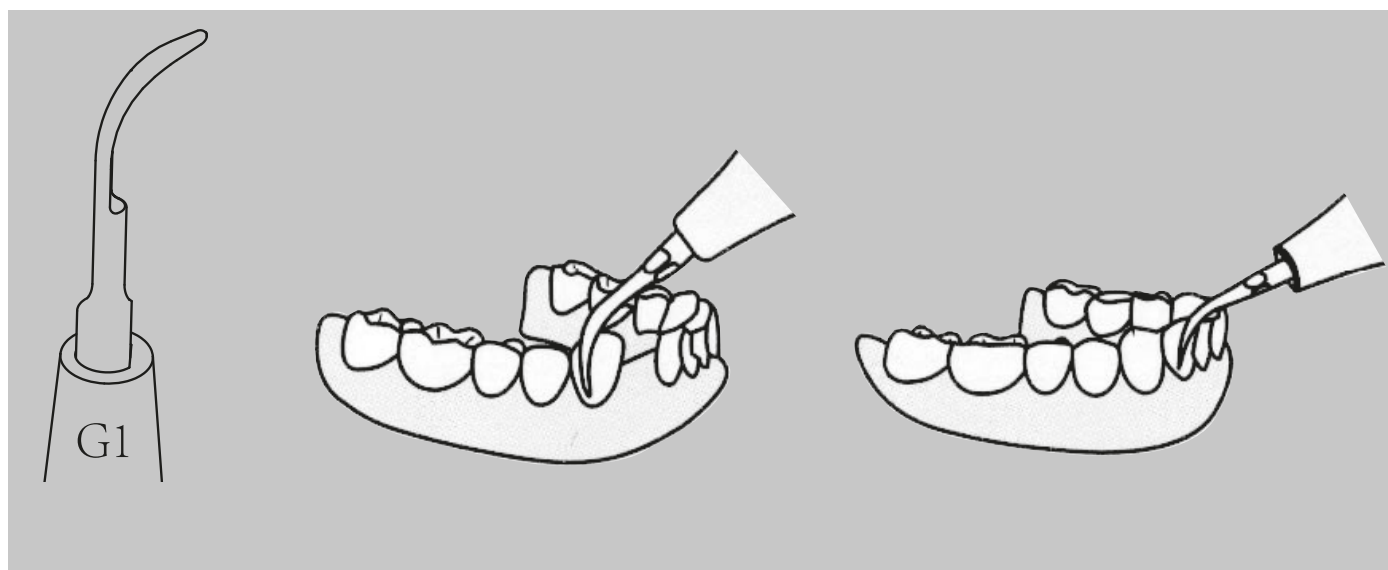

Hrot 1 je tenký, používá se k odstranění zubního kamene a skvrn od cigaret.

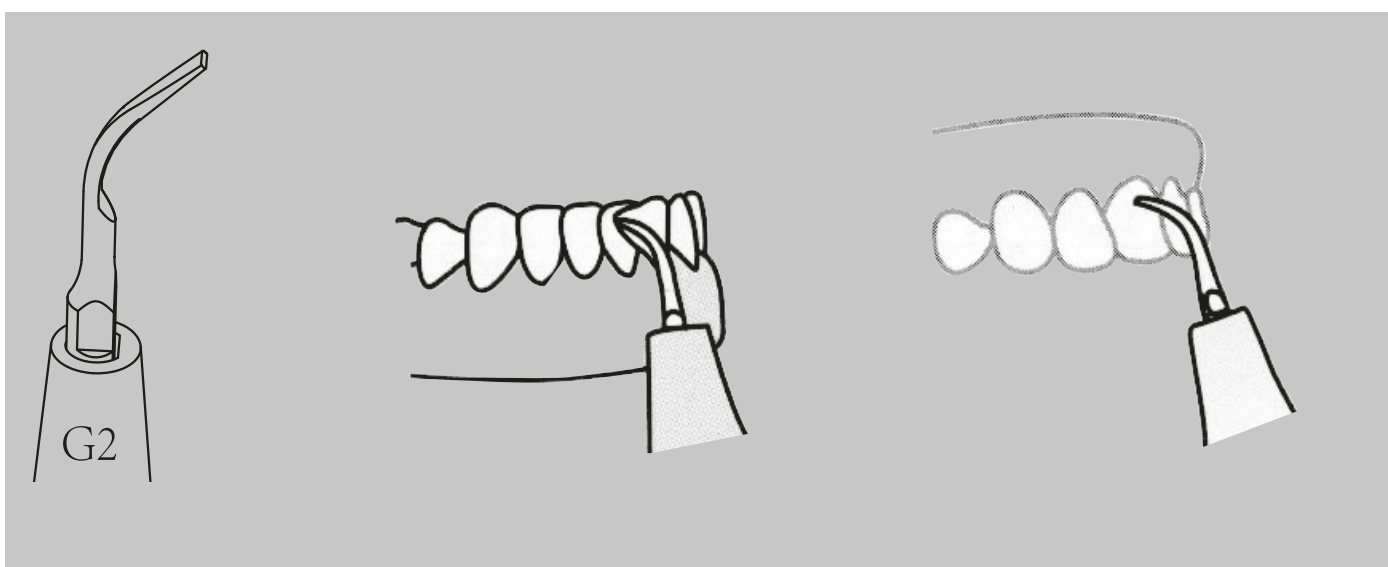


Hrot 2 je širší, slouží k odstranění velkých kamenů a skvrn od cigaret na krčku zubů.


- Napařte, namočte do alkoholu a dezinfikujte pracovní hrot vysokou teplotou a tlakem před použitím.
- Abyste předešli křížové infekci, nesdílejte pracovní hrot s mnoha lidmi.
- Frekvence přístroje je různá, vyberte si prosím správný pracovní bod.
- Použijte pracovní hrot správně, jak je uvedeno výše.

Jak používat hroty


Pracovní hrot se jemně svisle dotýká zubů a pohybuje se nahoru a dolů, stejně jako doleva a doprava. Upravte dobu používání každé části podle stavu zubů.

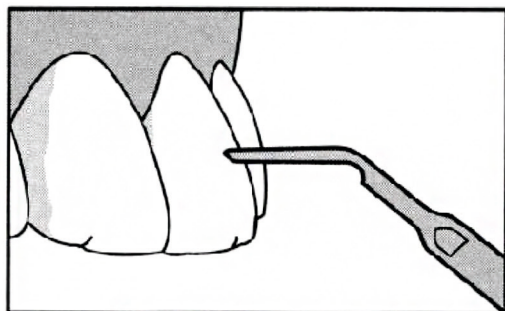


Nečistoty na povrchu zubů

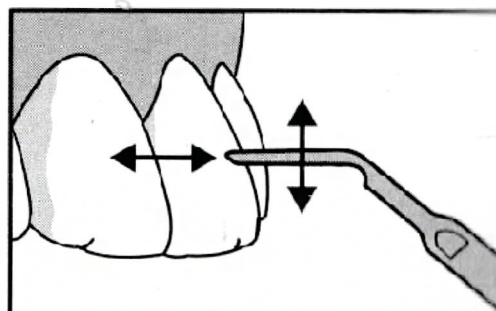


Hranice mezi dásní a zubem

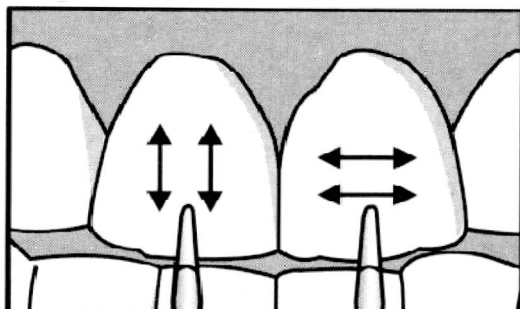


Mezizubní mezery

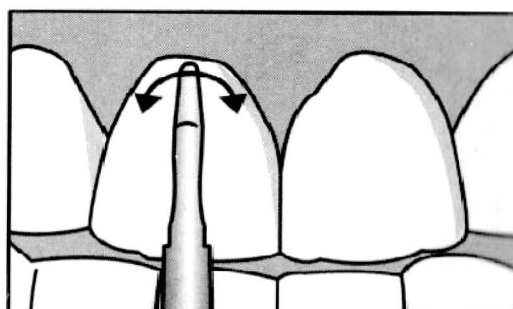



Nečistoty v nerovnostech zubů

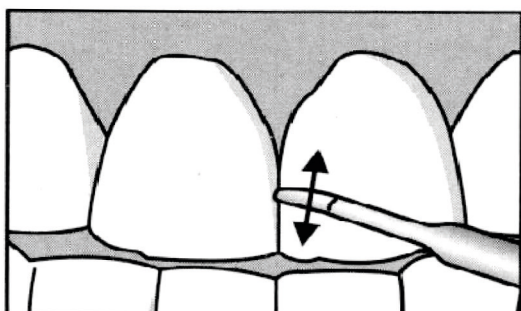

Nečistoty na zadní straně zubů

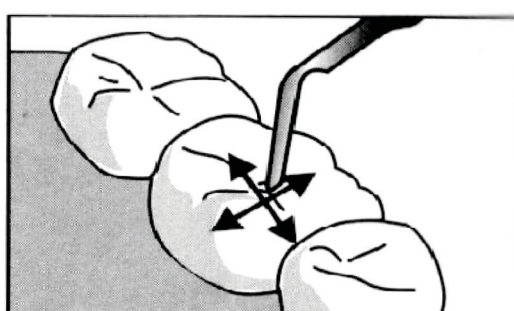

Použijte ústní zrcátko, při čištění zadní části zubů

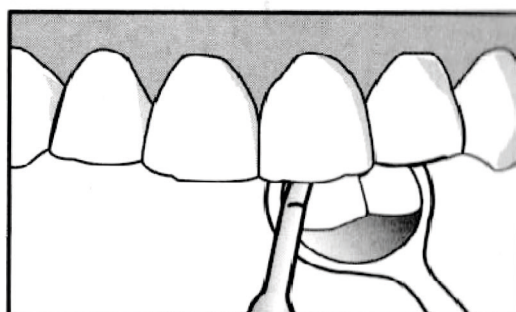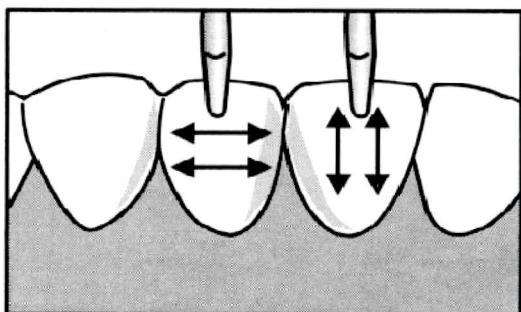


Výměna pracovního hrotu


Orientace pracovního hrotu může být různá, ale pokud je nehybně namontovaný, lze jej použít v libovolném směru.




Pokud je spojení uvolněné, výstup nelze přenášet správně. Použijte instalační klíč a ujistěte se, že pracovní hrot je připojen pevně. K rozebrání destičky na vzorky nepoužívejte jiné nástroje. Můžete způsobit poruchu nebo poškození.

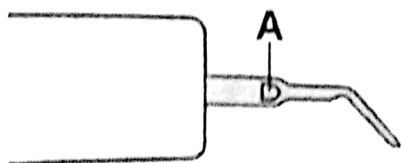


Potvrďte pozici A

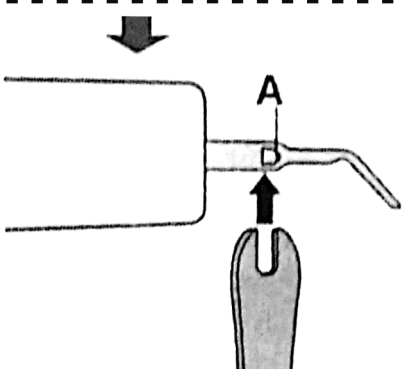

Vložte klíč do polohy A

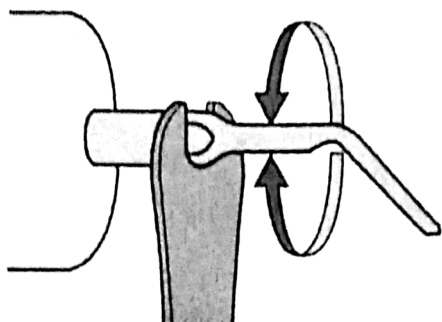

Otočte hlavu proti směru hodinových ručiček pomocí klíče k oddělení pracovního hrotu a dokončete demontáž.

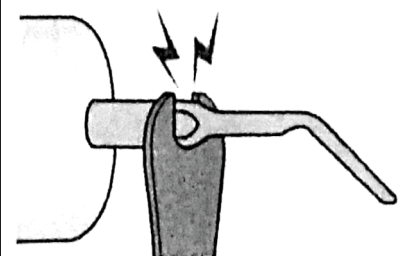

Preventivní opatření

Vyvarujte se příliš těsnému utažení, které by mohlo způsobit poškození.