

Přední

## Ultrasonický čistič zubů s kamerou

### Uživatelský manuál T12 Plus EN

### 1. Popis produktu

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod

Tento produkt je novým typem ultrasonického čističe zubů s kamerou. Produkt umožňuje připojení mobilních telefonů, tabletů a dalších zařízení, abyste jednoduše zjistili stav vašich zubů prostřednictvím aplikace. Využívá technologii ultrazvukové vysokofrekvenční rezonance k odstranění skvrn na zubech a dosažení efektu bělení a ochrany zubů.

#### Funcke jednotlivých tlačítek

Napájecí tlačítko:  
Dlouhé stisknutí pro zapnutí/vypnutí.

Krátké stisknutí změní režim:  
Mírný/střední/silný

LED:  
Zapnutí: Zelená kontrolka bliká

Připojení k WiFi: Zelená kontrolka svítí

LED:  
Nízká baterie: Červená kontrolka bliká

Při nabíjení: Červená kontrolka svítí

Nabití: Kontrolka je vypnutá

Dlouhé stisknutí pro zapnutí/vypnutí

WiFi kontrolka

Kontrolka elektrického nabití

Mírný režim

Střední režim

Silný režim

CZ-2

### 2. Bezpečnostní opatření

Abyste předešli riziku poruchy, úrazu elektrickým proudem, zranění, požáru a poškození zařízení nebo majetku, dodržujte prosím následující bezpečnostní opatření

1. Tento produkt má vestavěnou baterii. Nevhazujte tento výrobek do ohně ani jej nevystavujte slunci, jinak by mohlo dojít k explozi baterie.
2. Nepoužívejte tento výrobek během nabíjení.
3. Nepoužívejte tento produkt, pokud není nabíjecí port řádně zakryt.
4. Neupravujte ani neopravujte tento produkt sami.
5. Neumístujte nabíjecí zařízení tohoto produktu do vlhkého prostředí nebo do vody.
6. Neumístujte tento výrobek tam, kde mohou dosáhnout děti a kojenci.
7. Zabraňte pádu nebo nárazu/šoku produktu.
8. Nepoužívejte tento přípravek při koupání nebo koupání v horkých pramenech.
9. Ti, kteří trpí těžkou parodontózou, mají ošetřované zuby nebo se obávají příznaků diskomfortu v dutině ústní, se prosím před použitím poraďte s lékařem.
10. K čištění tohoto produktu nepoužívejte ředidlo na barvy, benzen ani jiné chemikálie.
11. Při prvním použití tohoto produktu může dojít k mírnému krvácení, protože kořen zubu je tomuto druhu čištění vystaven poprvé, což je normální. Pokud dojde k silnému krvácení, okamžitě přestaňte tento výrobek používat. Poraďte se také s lékařem.

CZ-3

### 3. Jak na to:

Krok č.1:

Naskenujte QR kód pomocí svého mobilního telefonu a stáhněte si aplikaci.  
(Android 4.4, iOS 9.0 nebo vyšší systémy podporují tuto aplikaci)



CZ-4

Krok č.2:

Otevřete aplikaci a klikněte na tlačítko v pravém horním rohu

Připojte vaše zařízení: zmáčkněte a držte tlačítko 3 sekundy.

A pro dokončení zkontrolujte výše uvedené kroky.  
Kliknutím zahájíte připojení.




CZ-5

Krok č.3:

Kliknutím zahájíte připojení a přejdete na nastavení mobilního telefonu – WiFi připojení.

Připojení k WiFi: SUNUO-T12-XXXX Heslo: 12345678

Klikněte na Sunuo pro navrácení do aplikace a použití produktu.

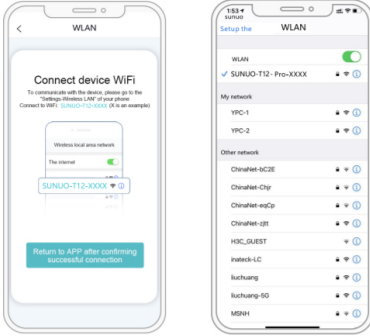

CZ-6


### 4. Informace o produktu

Upozornění:

Tento produkt funguje na principu ultrazvuku. Po zapnutí nebude produkovat nadfrekvenční vibrace, když se dotkne dásní nebo měkkých předmětů, a bude mít zřejmý pracovní výkon, když se dotkne zubů nebo tvrdých předmětů.


Podle vašich potřeb vyberte režim, který potřebujete.

**Mírný režim:** vhodný pro nováčky, šetrné odstraní skvrny od zubního kamene  
**Střední režim:** Odstraňte nepodajný zubní kámen, jako jsou skvrny od kávy, čaje atd.  
**Silný režim:** Odstraňte vytvořený zubní kámen a řádně vyčistíte zuby.

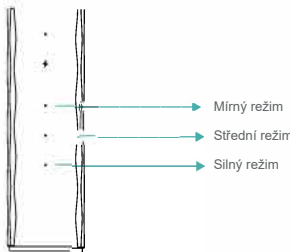


CZ-7

### 5. Příslušenství


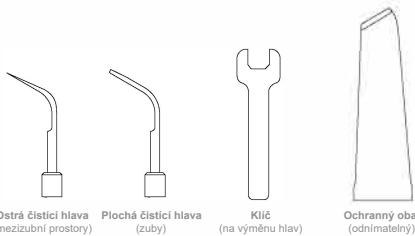


### 6. Výměna ochranného obalu

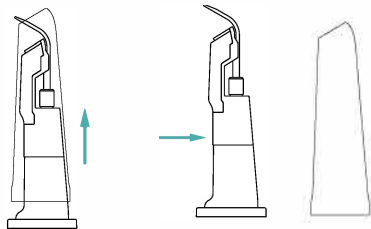

CZ-8

### 7. Výměna čistících hlav

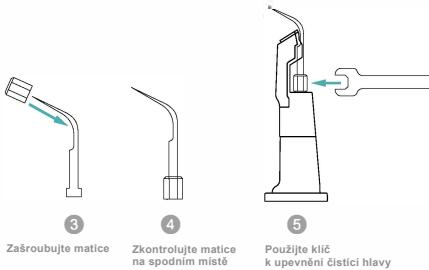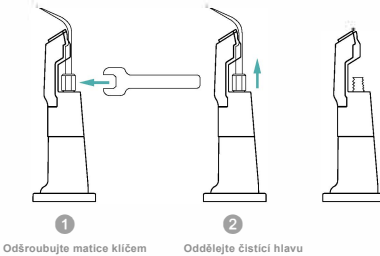

CZ-9

#### Odpovědi na často kladené otázky

1. Je krvácení z dásní během používání normální?

Odpověď: Pokud jej užívají lidé s parodontózou nebo zánětem dásní je snadné způsobit krvácení dásní i při čištění zubů a kousání tvrdého jídla. Pokud ale při používání tohoto produktu krvácejí dásně hodně přestaňte jej používat a opláchněte dásně studenou vodou.

2. Je normální, že se špička čistícího zubu během používání zahřeje?

Odpověď: Při použití se elektrická energie přeměňuje na kinetickou energii a je normální, že se teplota čistící hlavy mírně zvýší.

3. Je normální, že produkt občas vydává zvuky?

Odpověď: Zvuk je způsoben dotekem čistící hlavy a zubů, takže je to normální.

4. Je normální, že výrobek během práce náhle přestane fungovat?

Odpověď: Výrobek je vybaven funkcí automatického vypnutí, která zastaví práci převodníku poté, co převodník pracoval 10 minut a pro spuštění pracovního stavu je nutné znovu přepnout rychlostní stupeň.

CZ-10

#### Odstraňování problémů

1. Při zapínání není žádná odezva a kamera se nerozsvítí  
Před použitím plně nabijte.

2. Aplikace padá  
Vyčistěte aplikaci na pozadí mobilu a zrestartujte aplikaci.

3. Červená kontrolka bliká  
Značí, že baterie tohoto produktu je slabá, po nabití ji prosím použijte.

4. Produkt nezobrazuje obraz v reálném čase po připojení k aplikaci  
Odpojte WiFi připojení mezi mobilem a produktem. Restartujte produkt i telefon. Znovu otevřete aplikaci a znovu se připojte k Wifi.

5. WiFi připojení je nestabilní nebo se nezobrazuje žádný obraz.  
Restartujte zařízení a znovu se připojte k aplikaci

\* Pokud problém stále není vyřešen podle výše uvedených operací, kontaktujte prosím zákaznický servis.

CZ-11

#### Parametry produktu

Název produktu  
Ultrasonický čistič zubů s kamerou

Produktové číslo  
T12 Plus

Standard sítě  
IEEE 802.11b/g/n

Frekvence  
2.4GHz

Obrazový přenos  
30fps

Obrazový senzor  
CMOS

Teplota práce  
-10 - 50 °C

Baterie  
1200mAh

Výdrž baterie  
Kolem 90 minut

Napájecí čas  
1,5 až 2 hodiny

Vstupní parametry  
5V = 0.5A

Provozní napětí  
5V

Výkon  
1.8 W

Kamera  
5 MP

Nejlepší zaměření  
0-2cm

Made in China

CE FC RoHS

CZ-12

Zadní