


# Ústní sprcha Floss™

## Uživatelská příručka

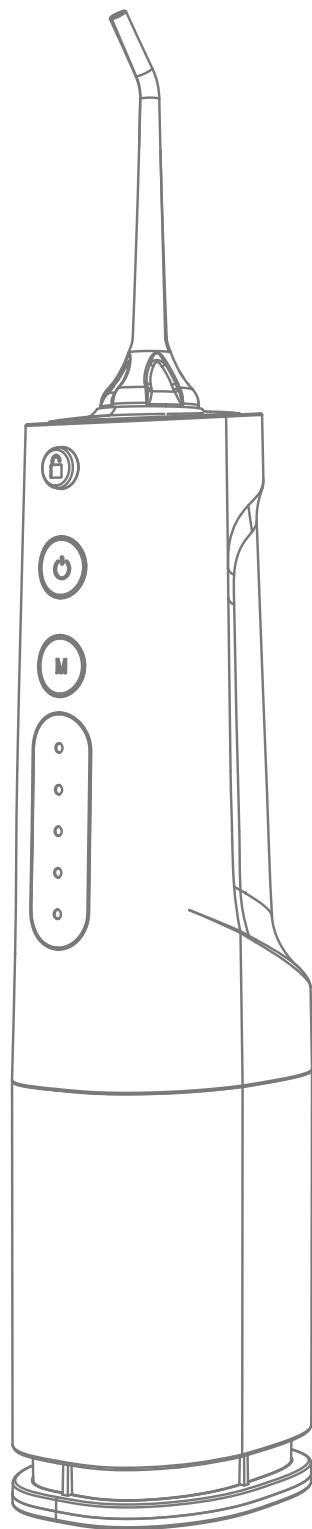

Děkujeme za výběr a důvěru

# Obsah

Obsah . . . . .	01
Speciální tipy . . . . .	02
Upozornění k použití . . . . .	03
Důležitá ochranná opatření . . . . .	04
Varování . . . . .	04
Popis produktu . . . . .	05
Vlastnosti produktu . . . . .	05
Návod k obsluze . . . . .	06
Opatření nabíjení . . . . .	06
Doporučené dovednosti . . . . .	07
Průvodce čištěním . . . . .	07
Průvodce odstraňováním problémů . . . . .	08


# Speciální tipy

Kontrola kapacity baterie: Pokud je kapacita baterie vyšší než 75 %, budou svítit 4 kontrolky režimů. 75 % až 50 % kapacity baterie budou svítit kontrolky 3 režimů. Kapacita baterie 50 % až 25 % budou svítit 2 kontrolky režimu. Jasně bude svítit pouze světlo v režimu DIY.

## Nastavení DIY režimu

Při přepnutí do čtvrtého „DIY“ režimu si systém pamatuje poslední použitý stav. Ve čtvrtém režimu stiskněte znovu tlačítko ON/OFF, pracovní stav se zvýší z nejnižšího tlaku vody na nejvyšší tlak vody a dočasně zůstane v režimu nejvyššího tlaku vody. Podle tohoto režimu bude cirkulovat. Uvolněním tlačítka ON/OFF označíte výběr pracovního stavu (nový stav je uzamčen), systém se udržuje a pracuje v nejnovějším pracovním stavu.

## Příslušenství

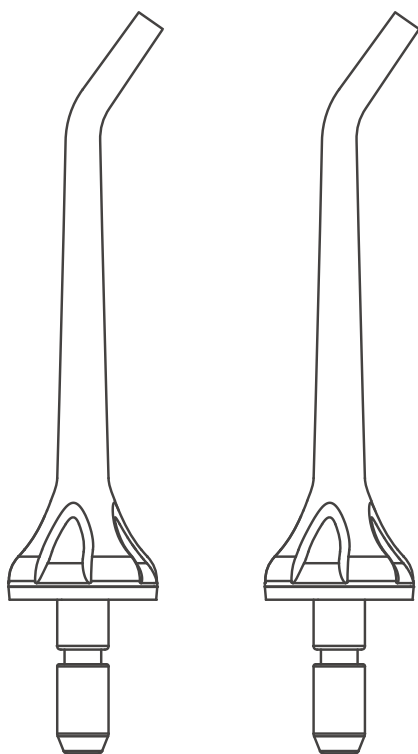

2 trysky  
1 USB kabel



# Upozornění k použití

Při prvním použití nebo delším nepoužívání musíte po stisknutí vypínače chvíli počkat, než tryska ústní sprchy vypustí vodu. Za těchto okolností postupujte takto:

- Zatáhněte za vnitřní nádržku na vodu, aby se úplně roztáhla až ke spodnímu konci, nejprve uslyšíte cvaknutí. To znamená, že vnitřní nádrž na vodu byla zatažena na správné místo (pokud tak neučiníte, voda z vnitřní nádrže vyteče).
- Poté otevřete vodu vstupní kryt pro plnění vody do vodní nádrže.
- Po přidání dostatečného množství vody do zvedáku sedla trysky trysku znovu nainstalujte a poté zapněte tlačítko ON/OFF.

## Upozornění

1. Pro první použití nastavte "měkký" režim.
2. Během používání držte špičku trysky směřující těsně k mezerám mezi zuby. Čím dále, tím silnější bude tlak trysky.


# Důležité záruky

1. Nerozebírejte a neopravujte vnitřní součásti produktu.
2. Hrot trysky tohoto modelu je vyměnitelný a univerzální pro stejné produkty naší společnosti.
3. Před a po použití prosím zkontrolujte USB kabel, zda není poškozený, udržujte jej mimo horké povrchy.
4. Nevkládejte žádné cizí předměty do otevíracích otvorů.
5. Nedotýkejte se napájecího zdroje produktu a nenabíjejte produkt v mokřém prostředí.
6. Neumísťujte ani neskladujte výrobek tam, kde by mohl spadnout nebo být vtažen do vany, sprchy nebo umyvadla.
7. Produkty lze plnit pouze vodou nebo jinou nekorozivní kapalinou doporučenou odbornými lékaři.

## Varování

1. Pokud jste v posledních 2 měsících podstoupili chirurgický zákrok na ústní nebo zubní dutině, poraďte se před použitím tohoto přípravku se svým lékařem a řiďte se jeho radami a pokyny.
2. Při prvním použití tohoto produktu k čištění úst můžete zaznamenat drobné krvácení dásní i v případě zdravých dásní. Je to proto, že vaše dásně jsou poprvé stimulovány tlakem trysky a obvykle přestanou krváčet po 1-2 týdnech adaptace. Pokud krvácení z dásní trvá déle než 2 týdny, může to znamenat abnormální stavy, jako je periodontální onemocnění dásní. V takovém případě přestaňte výrobek používat a poraďte se se svým zubním lékařem.
3. Tento výrobek nepoužívejte, pokud je kabel nebo zástrčka výrobku poškozena nebo nefunguje, spadne, je poškozená nebo se dostane do jakékoli kapaliny.
4. Nepřipojujte tento produkt k jinému napětovému systému, nežli je určeno k tomuto zařízení nebo nabíječce.
5. Tento produkt není vhodný pro osoby (včetně dětí), které mají slabé fyzické, sensorické nebo duševní schopnosti nebo nemají dostatek zkušeností, bez vědomí opatrovníka.
6. V pracovním stavu nevstříkujte vodu do spodní části jazyka, uší, nosu nebo jiných citlivých částí těla. Tlak vyvíjený tímto produktem může způsobit vážné poškození.


# Popis

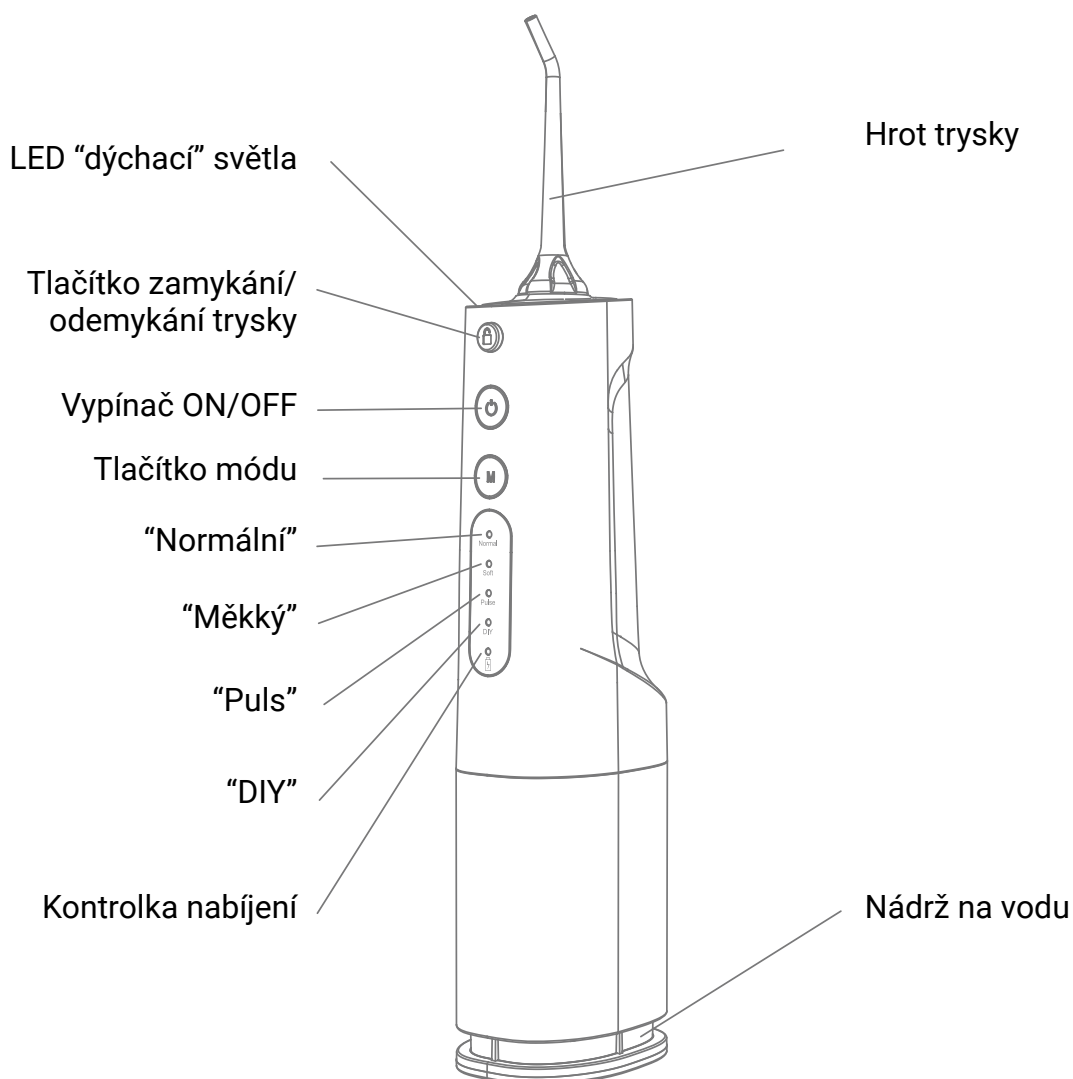

Poznámka: V nádržce na vodu produktu může zůstat trochu tekutiny. Jedná se o destilovanou vodu, která zbyla během tovární kontroly. Neexistuje žádné riziko pro zdraví a bezpečnost.

## Vlastnosti

1. 360ml odnímatelná rozšiřitelná dvojitá nádrž na vodu, malé tělo, přenosná, snadno se čistí.
2. Barevná "dýchací" světla, jemné světelné efekty a stav tříbarevného indikátoru, které vám zpříjemní používání.
3. IPX7 vodotěsný pro celé tělo, takže jej lze použít ve sprše.

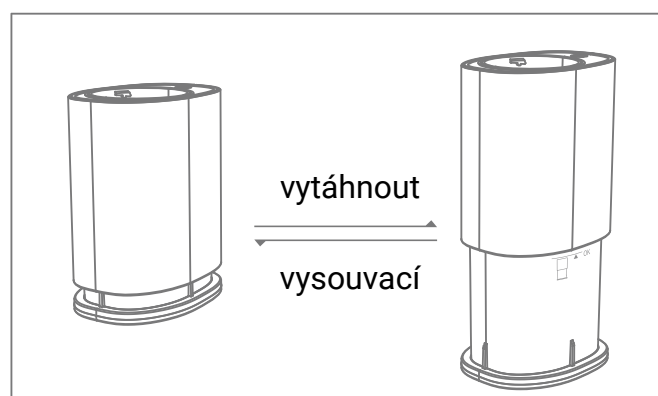

# Návod k obsluze

1. Před prvním použitím se ujistěte, že je zařízení plně nabito. Nejprve stiskněte tlačítko ON/OFF a poté stiskněte tlačítko mode pro výběr pracovního režimu.
2. Plnění nádržky na vodu: Otevřete přívod vody nádržky na vodu, naplňte nádržku vodou, zavřete vstupní okénko a pevně zatlačte. (Upozornění: Nádržka na vodu je odnímatelná a lze ji pro naplnění vodou rozebrat. Během takové operace nezačínajte pracovat).
3. Nainstalujte/vyměňte trysku: Vložte trysku do trysky uprostřed horní hlavy ústní sprchy. Chcete-li vyměnit nebo odstranit trysky, stiskněte tlačítko pro zamknutí/odemknutí trysek.
4. Vyberte pracovní režim: Při prvním použití můžete stisknutím tlačítka režimu na rukojeti vybrat vhodný režim čištění. Můžete si také zvolit režim čištění podle pokynů profesionálního zubního lékaře. (Normální režim: standardní režim čištění, dokáže účinně odstranit zbytky jídla v mezeře zubů, hloubkově vyčistit zuby, udržet ústa svěží. Soft režim: jemná masáž dásní. Pulzní režim: pulzní masáž dásní, podpora krevního oběhu. Režim DIY: Uživatelé si mohou přizpůsobit intenzitu čištění podle osobních preferencí a nastavit různé intenzity čištění v rámci rozsahu).

## Opatření u nabíjení

1. Před prvním použitím nabíjejte produkt 8 hodin. K nabíjení produktu použijte 5V 1A nabíječku.
2. Odstraňte silikonový kryt z nabíjecího lůžka, zasuňte USB kolík do nabíjecí zásuvky ústní sprchy (před použitím se ujistěte, že v zásuvce není žádná zbytková tekutina).
3. Zapojte další boční USB konektor do nabíječky a poté zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
4. Při nabíjení svítí indikátory nabíjení červeně a pomalu blikají. Po úplném nabití zůstane indikátor nabíjení zelený, dokud nabíječku nevyjmete.

# Doporučené dovednosti

- Udržujte jednotku ve svislé poloze se špičkou trysky směrem k zubům. Pro dosažení nejlepších účinků při používání udržujte produkty kolmo k ústům.
- Pootevřete ústa, aby mohla vytéct voda. Rozprašujte proud vody na zuby a dásně pod určitým úhlem. Pomalu pohybujte vodním nástavcem podél zubů.

## Průvodce čištěním

Nikdy neponořujte přístroj do žádné kapaliny.

### Nádrž na vodu

- Lze jej umýt mýdlovou vodou nebo umístit na horní přihrádku na nádobí v myčce. Před čištěním odpojte napájecí kabel.
- Vodu v nádrži vždy vypusťte a vysušte před vystavením prostředí s teplotou mrazu.
- Nečistoty omyjte kartáčem nebo podobným předmětem a poté je setřete hadříkem.
- Vysušte zásobník na vodu, který se delší dobu nepoužívá.

### Tryska

- Stisknutím tlačítka pro zamknutí/odemknutí trysky trysku sejměte. Vyčistěte ji vodou a otřete hadříkem.
- Doporučuje se vyměnit koncovku trysky za novou každé 3 měsíce. V opačném případě bude špička trysky příliš velká na to, aby účinně čistila zuby.



# Průvodce řešením problémů

## Tělo přístroje

Nečistoty otřete hadříkem navlhčeným ve slabém saponátu a poté otřete suchým hadříkem. Pokud je velmi znečištěný, lze jej omýt vodou.

- Nepoužívejte alkohol, benzín, ředidlo atd. k otření produktu.
- Nepoužívejte horkou vodu nad 50°C.
- Po čištění setřete vodu.
- Neohýbejte sací potrubí. V opačném případě nemusí sací potrubí fungovat, jako je zastavení absorpce vody během provozního stavu.
- Včas vyčistěte filtrační síť sacího potrubí, aby nedošlo k ucpání krytu vodní nádrže.
- Nečistoty setřete, jinak dojde k úniku vody.

<b>Problémy</b>	<b>Důvod</b>	<b>Způsob manipulace</b>
Praskání trysek	Vážné poškození trysky	Vyměňte nový hrot
Z nádrže na vodu uniká voda	Těsnění je poškozené	Vyměňte těsnění a vraťte jej k opravě dodavateli
	V nádržce na vodu zůstala voda nebo jiná kapalina	Po každém použití nezapomeňte vyprázdnit nádržku na vodu
	Kryt nádržky na vodu není zavřený	Zavřete kryt nádržky na vodu
Netěsnost mezi tryskou a jejími objímkami	Špička trysky není správně nainstalována	Odstraňte trysku a znovu ji nainstalujte
Žádný průtok kapaliny nebo nedostatečný tlak	Zařízení je obrácené	Odstraňte trysku a znovu ji nainstalujte
	Nedostatek vody nebo kapaliny v nádrži	Tryska musí být výše než nádržka na vodu
	Špatný pracovní režim	Plnění nádrže kapalinou Vyberte režim "Normální"