


WATERSONIC

Ultrazvukový čistič zubů
s vodním chlazením miDent

Uživatelský manuál
Představení produktu

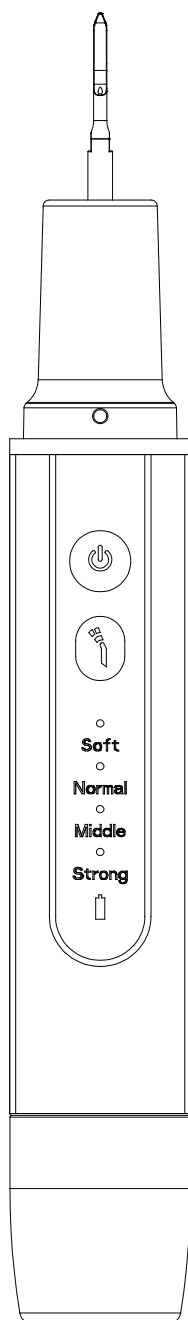

Představení produktu a vlastnosti

Zdraví začíná u zubů. Děkujeme, že jste si vybrali náš inteligentní ultrazvukový čistič zubů WATERSONIC s inovativní funkcí vodního chlazení. Ultrazvukový čistič je navržen pro snadné domácí použití. WATERSONIC účinně odstraňuje zubní plak, zubní kámen, skvrny ze zubů a odstraněním tvrdého zubního kamene předchází onemocnění dásní. Tento multifunkční odstraňovač zubního plaku využívá pokročilé vibrace k odstranění pigmentace ze zubů. Produkt má 4 nastavitelné režimy: jemný, normální, střední a silný. Produkt obsahuje vodní chlazení, které pomáhá udržovat optimální teplotu a chrání zuby před přehřátím během používání. Produkt disponuje také ochranou proti přehřátí s 10 minutovým automatickým vypnutím, která se aktivuje po vypnutí LED světla. Vysoký pulzní proud vody snižuje teplotu pracovní špičky. Ultrazvukový čistič je vybaven sterilizátorem UV záření.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod A UCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
- Při použití vždy přiložte špičku na povrch zubu. Vyvarujte se zbytečného kontaktu špičky s měkkými tkáněmi, jako jsou dásně, sliznice nebo kůže.
- Vibrace ucítíte až při kontaktu se zubem. Při kontaktu s dásní se čistič automaticky vypne.
- Špička se během čištění nesmí dotýkat keramické protézy, plomby ani jakékoliv výplně zubu. Mohlo by dojít k poškození špičky. Nepoužívejte přístroj jinou metodou, než je popsána v tomto návodu.
- Kovová hlavice čističe zubů je vyměnitelná.
- Udržujte čistič zubů v dostatečné vzdálenosti od očí.
- V případě poruchy, prosím přestaňte používat.
- Tento výrobek není hračka. Nenechte ho používat své děti.
- Zakázáno pacientům s kardiostimulátorem.
- Pacienti s onemocněním srdce, těhotné ženy a děti by měli být opatrní.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, měl by být skladován v 10° až 40°C ve vnitřním prostředí.
- Výrobek sami nerozebírejte.
- Nepoužívejte výrobek během nabíjení.
- V případě problémů s kvalitou produktu kontaktujte zákaznický servis obchodu, kde jste tento produkt zakoupili.

Princip fungování produktu

Tento čistič pracuje na principu, který převádí elektrickou energii na energii ultrazvukových vibrací. Stisknutím tlačítka napájení zapněte zařízení, upravte výkon pomocí tlačítek režimů a začněte čistit požadovaná místa na zubech. Vysoké vibrace slouží k rozdrncení zubního kamene, odstranění odolných zubních skvrn a odstranění plaku. Při čištění používejte proud vody pro chlazení špičky.

Záležitosti vyžadující pozornost

1. Pokud máte onemocnění parodontu, poraďte se před použitím se svým zubním lékařem.
2. Může dojít ke krvácení i v případě zdravé dásně.
3. Pokud krvácení z dásní přetrvává, což může být způsobeno defekty dásní, jako je periodontální onemocnění, přerušete používání a poraďte se se svým zubním lékařem.
4. V procesu čištění zubů nezůstávejte pracovním hrotem dlouho na povrchu zubů.
5. Po spuštění přístroje není slyšet žádný zvuk hrotu. Zvuk ultrazvuku uslyšíte až při kontaktu se zubem.
6. Nenamáčejte do vody nebo kapaliny.
7. Před a po použití udržujte stroj čistý.
8. Pracovní hrot musí být při použití utažen.
9. Neohýbejte ani neobrušujte pracovní hrot.
10. Neklepejte ani neškrábejte do rukojeti.
11. Po použití stroj osušte a uchovávejte jej v suchém a chladném prostředí.
12. Během používání zařízení netahejte za napájecí kabel, aby nedošlo k oddělení rukojeti od stroje.


Údržba a čištění

Se zařízením je třeba zacházet opatrně a skladovat jej na suchém místě. Nemíchejte s toxickými, žíravými, hořlavými a výbušnými materiály. Po každém čištění si důkladně vypláchněte ústa. Desinfikujte kovovou hlavici pod čistou tekoucí vodou. Otřete tělo čističe zubů.

Poznámky k používání

1. Nepotápějte přístroj do vody ani jiných tekutin.
2. Před a po použití udržujte zařízení čisté.
3. Při používání pevně utáhněte pracovní špičku.
4. Při prvním zapnutí zařízení nejprve spusťte na 2–3 sekundy, poté na 1 sekundu vypněte. Tuto operaci opakujte několikrát, aby se pracovní nástavec dostal do optimálního stavu.
5. Nemačkejte ani nebrušte pracovní špičku.
6. Na rukojeť neklepejte ani ji neškrábejte.
7. Po použití zařízení vysušte a uchovávejte na suchém a chladném místě.
8. Nádobku na vodu naplňte pouze čistou nezávadnou vodou.


Popis produktu

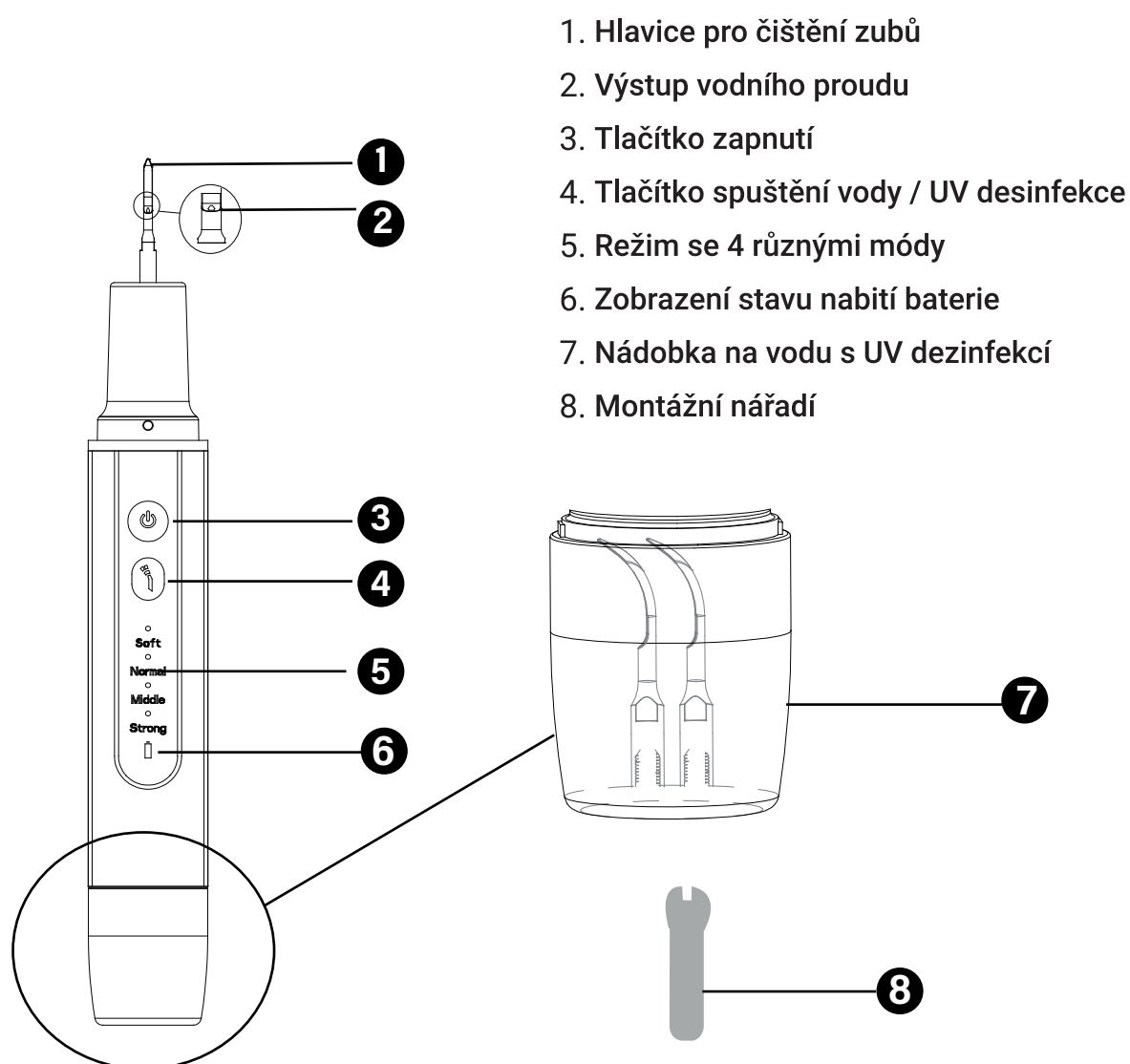


Použití zařízení

1. Před použitím se ujistěte, že je čistič plně nabitý. Úplné nabití trvá přibližně 2 hodiny.
2. Pokud nabíjíte čistič zubů poprvé nebo jste jej delší dobu nepoužívali (déle než 3 měsíce), může úplné nabití vyžadovat více času.
3. Vyberte vhodný hrot a nainstalujte jej ve směru hodinových ručiček.
4. Nepoužívejte silné otáčení, aby nedošlo k poškození.
5. Naplňte vodou nádržku určenou pro vodu. Pro funkci vodního chlazení se dají využít obě nádoby - nádobka ve spodní části přístroje i nádobka chránící pracovní špičku.
6. Stiskněte tlačítko pro spuštění přístroje ON a zapněte režim SOFT pro jemné čištění a poté režim NORMAL pro normální čištění. Rozsvítí se kontrolka režimu spuštění a LED světlo na předním konci rukojeti, což znamená, že přístroj běží.
7. Tlačítkem s označením vody spustíte silný proud vody, který ochlazuje špičku a zuby při čištění.
8. Vodní proud používejte střídavě po celou dobu čištění. Zuby i pracovní hrot by měly být navlhčené po celou dobu čištění ultrazvukovým čističem.
9. Strana konce špičky se umístí na zub tak, aby byl pohyb špičky rovnoběžný s povrchem zubu.
10. Těžko odstranitelný zubní kámen může vyžadovat vyšší nastavení výkonu v režimu COMFORT a STRONG.
11. Ujistěte se, že, během čištění udržujete kontakt špičky s povrchem zubu.
12. Špičkou stále pomalu pohybujte tam a zpět a nechte práci na přístroji. Používejte krátké a dlouhé tahy, aby se celý povrch zubu vyčistil.
13. POZOR: při čištění zubů nevyvíjete velkou sílu na jednom místě a nesetrvávejte na jednom místě déle než 5s.
14. Přístroj je náchylný k poškození vnitřních a vnějších součástí způsobených pádem či nesprávným zacházením.
15. Vždy používejte přístroj s funkcí vodního chlazení, aby nedošlo k přehřátí čisticí hlavice.
16. Při použití na vnitřní straně zubu použijte zubní zrcátko.
17. Detekce nízkého napětí. Alarm bliká, když je napětí baterie nižší než 3V.
18. Při použití dlouze stiskněte tlačítko OFF a vypněte napájení. Zařízení má přednastavenou funkci automatického vypnutí po 10 min, aby se zabránilo přehřátí.

Hroty

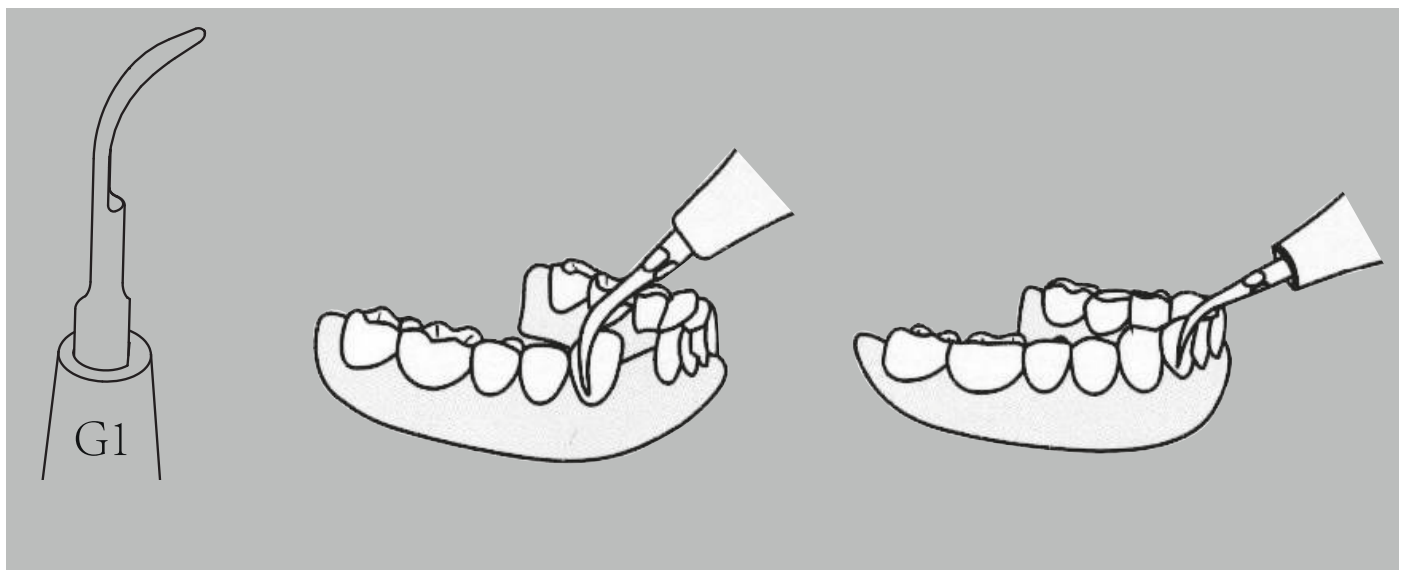

Hrot 1 je tenký, používá se k odstranění zubního kamene a mezizubní čištění.

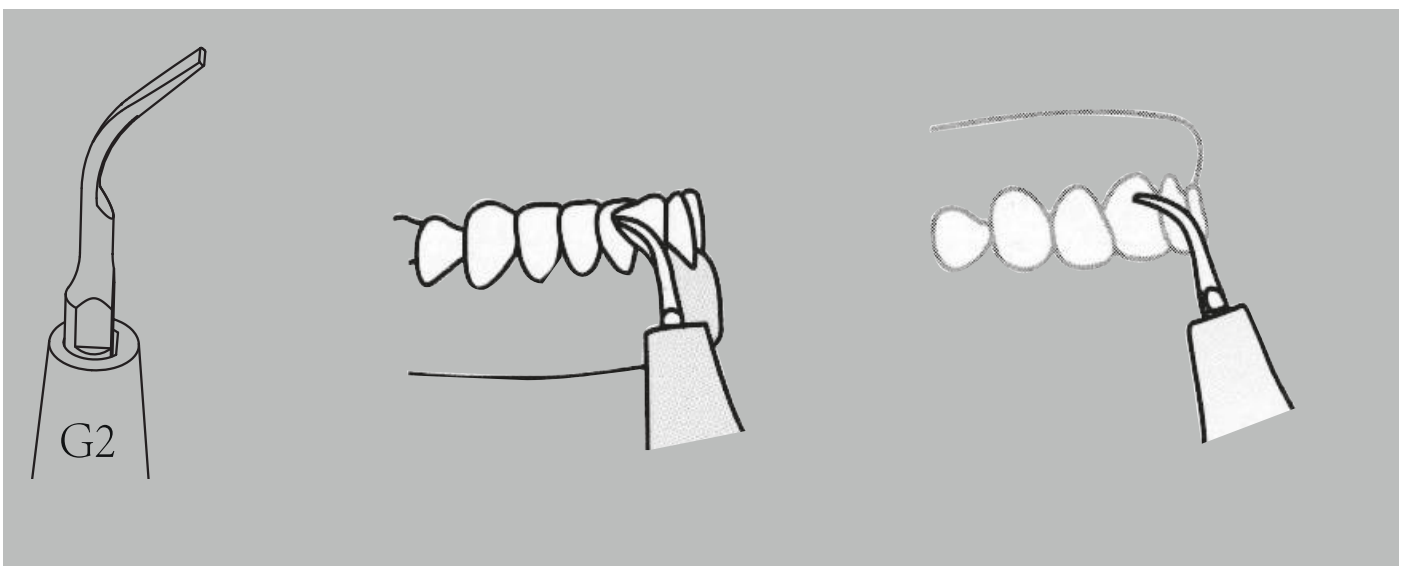


Hrot 2 je širší, slouží k odstranění velkých zubních kamenů a pigmentace na zubech.


- Dezinfikujte pracovní hrot horkou vodou s vysokou teplotou před použitím.
- Abyste předešli křížové infekci, nesdílejte pracovní hrot s dalšími lidmi.
- Frekvence přístroje je různá, vyberte si prosím správný pracovní režim.
- Použijte pracovní hrot správně, jak je uvedeno výše.

Jak používat hroty


Pracovní hrot se jemně svisle dotýká zubů a pohybuje se nahoru a dolů, stejně jako doleva a doprava. Upravte dobu používání každé části podle stavu zubů.

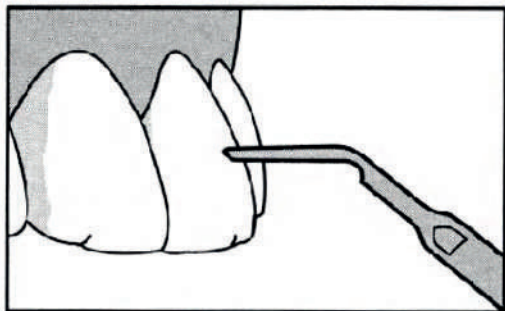


Nečistoty na povrchu zubů

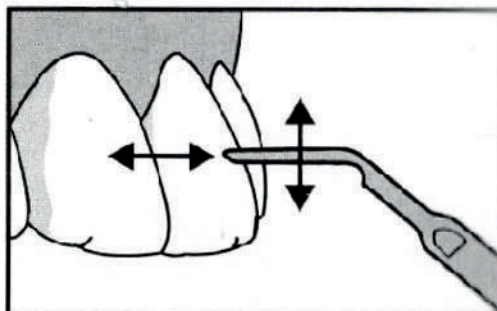


Hranice mezi dásní a zubem

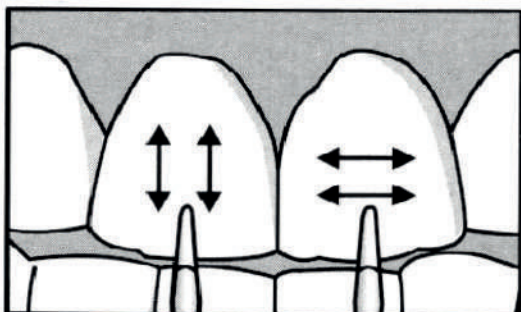


Mezizubní mezery

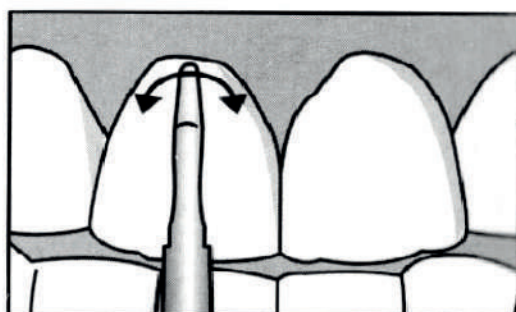



Nečistoty v nerovnostech zubů

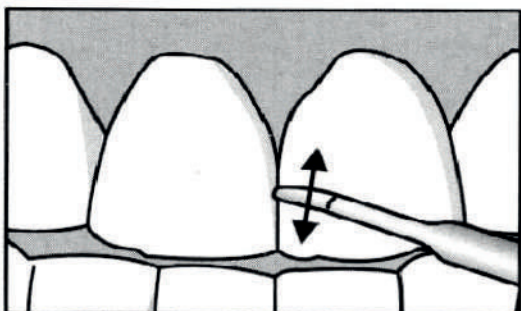

Nečistoty na zadní straně zubů

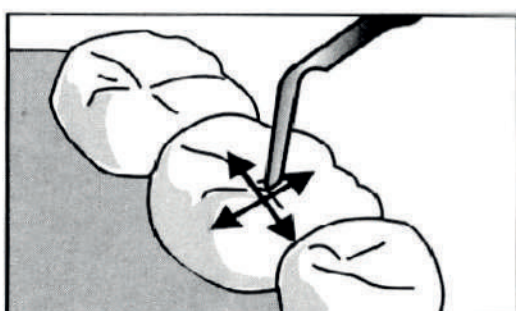


Použijte ústní zrcátko, při čištění zadní části zubů

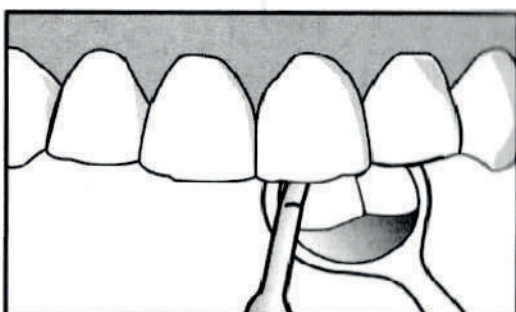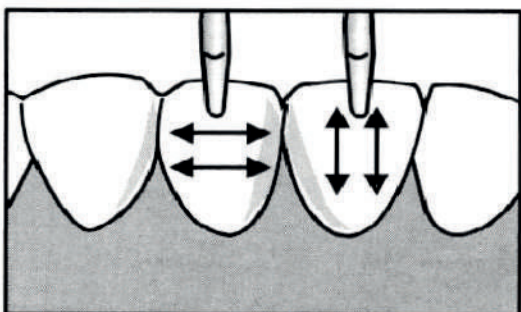


Výměna pracovního hrotu




Pokud je spojení uvolněné, vibrace nelze přenášet správně. Použijte instalační klíč a ujistěte se, že pracovní hrot je připojen pevně. K rozebrání nepoužívejte jiné nástroje. Můžete způsobit poruchu nebo poškození.

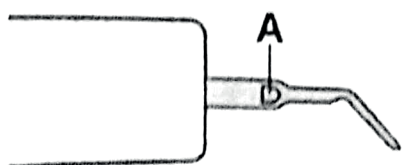


Potvrďte pozici A

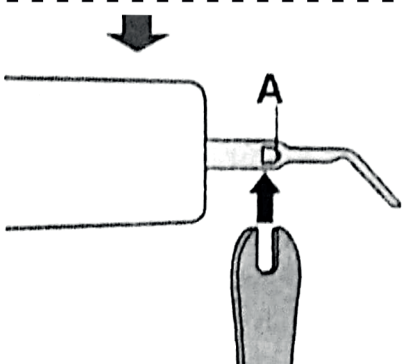

Vložte klíč do polohy A

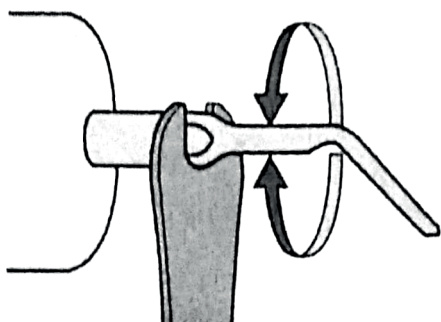

Otočte hlavu proti směru hodinových ručiček pomocí klíče k oddělení pracovního hrotu a dokončete demontáž.

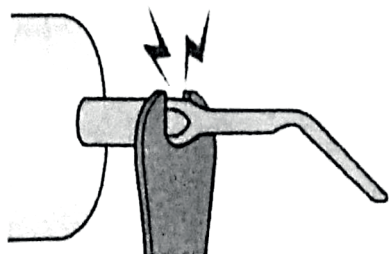


Preventivní opatření

Vyvarujte se příliš těsnému utažení, které by mohlo způsobit poškození.

Údržba



Nepoužívejte ředidla, benzen a rozpouštědla, chemikálie, nebo čisticí prášky.

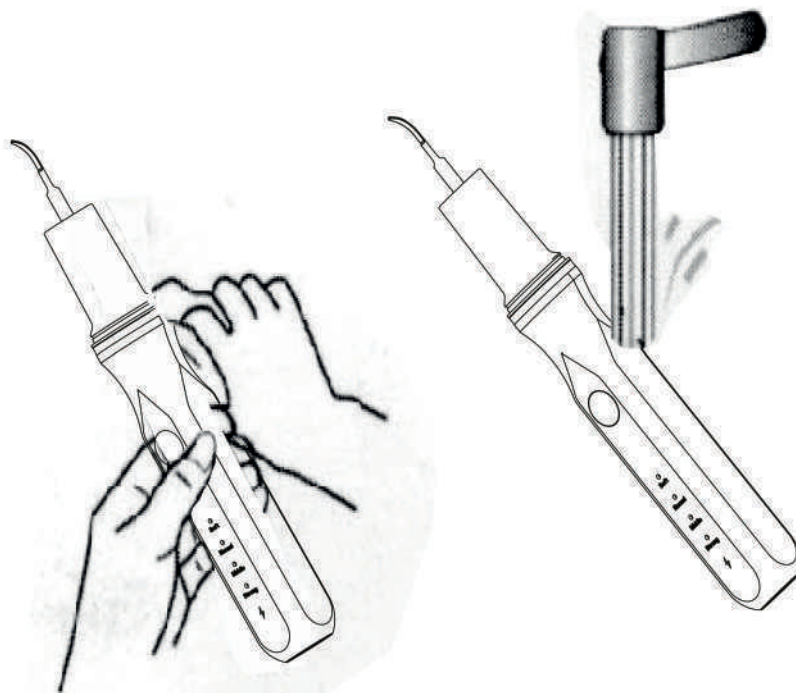

Tělo přístroje může být přímo omyté vodou a špínu lze otřít pomocí hadříku.

Upozornění

- Před použitím našich pomůcek se poraďte s licencovaným zubním lékařem nebo dentálním hygienikem. Poskytujeme výrobek, nikoli léčebný plán, a proto neneseme žádnou odpovědnost za případné komplikace. Pokud se rozhodnete používat jej bez odborného dohledu, budete jej používat na vlastní nebezpečí. Když se na nás obrátíte a pokud vám dáme nějaké rady, neberte je jako samozřejmost, protože nejsme zodpovědní za to, že jsme vám poradili.
- Tento výrobek není náhradou zdravotnického zařízení a nemá terapeutický účinek.
- Výrobek není vhodný pro děti do 18 let.